

Cavislim advance

Tecnovita
by **BH**

ESPAÑOL

PORTUGUES



cavitación/cavitação

moldeado
seguro y eficaz
de la figura

modelagem segura
e eficaz da figura

Manual
de usuario
Manual do
utilizador

YS70

Cavislim

advance

moldeado seguro y
eficaz de la figura

modelagem segura
e eficaz da figura

Enhorabuena. Primeramente nos gustaría agradecerle la compra de CAVISLIM ADVANCE y la confianza depositada en nosotros. A través de este práctico Manual de Usuario y siguiendo sus sencillas instrucciones usted conseguirá unos resultados comparables a los que obtendría de la mano de un profesional de la belleza.

Le recomendamos encarecidamente leer este Manual de Usuario de forma detenida. Su lectura y comprensión le ayudará a utilizar CAVISLIM ADVANCE de una forma eficaz y segura.

Antes de mais, gostaríamos de apresentar as nossas felicitações pela compra da CAVISLIM ADVANCE e agradecer a confiança depositada na nossa empresa. Através deste prático Manual do Utilizador e seguindo as suas simples instruções conseguirá obter resultados comparáveis aos que obteria entregando-se aos cuidados de um profissional da beleza.

Recomendamos encarecidamente a leitura atenta e minuciosa deste Manual do Utilizador, o qual proporcionará a utilização da CAVISLIM ADVANCE de uma forma eficaz e segura.

contenidos

capítulo 1

- contenido de la caja
- ensamblaje de CAVISLIM ADVANCE

capítulo 2

- características básicas de Cavislim Advance
- instrucciones de uso de CAVISLIM ADVANCE

capítulo 3

- modos de aplicación de CAVISLIM ADVANCE

capítulo 4

- para una correcta y segura
aplicación de CAVISLIM ADVANCE

capítulo 5

- preguntas frecuentes sobre CAVISLIM ADVANCE

capítulo 6


- información importante de seguridad
- garantía
- certificados
- especificaciones técnicas
- despiece

capítulo 1


contenido de la caja

En esta caja encontrará todo lo necesario para poder disfrutar de CAVISLIM ADVANCE. Compruebe minuciosamente en la siguiente ilustración todos los elementos que debe contener su embalaje.

Soporte de
manípulos

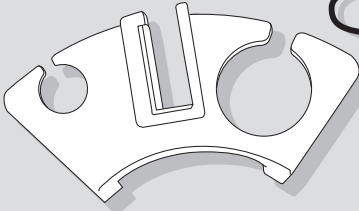

Manípulo M80

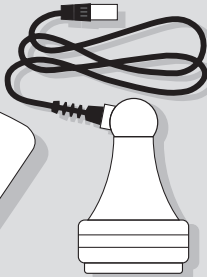


Manípulo M38



Cuerpo central




Pedal de
accionamiento

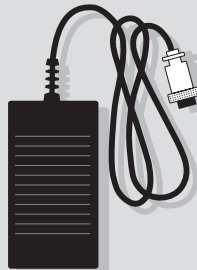

DVD



Manual
de usuario

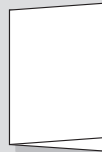

Gel de
cavitación




Llave
Allen



4 tornillos



Cable de conexión
a la red

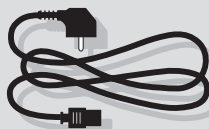

Sérum
anticelulítico




Sérum
reafirmante



ensamblaje de Cavislim Advance

Primeramente vamos a proceder a ensamblar el **soporte de manípulos** en el **cuerpo central**. Para ello colocaremos el **cuerpo central** sobre una mesa y posicionaremos el **soporte de manípulos** introduciendo los **tornillos** tal como muestra la figura adjunta.

Con la ayuda de la **llave Allen** ajustaremos firmemente los **tornillos** hasta que las dos piezas queden perfectamente unidas.

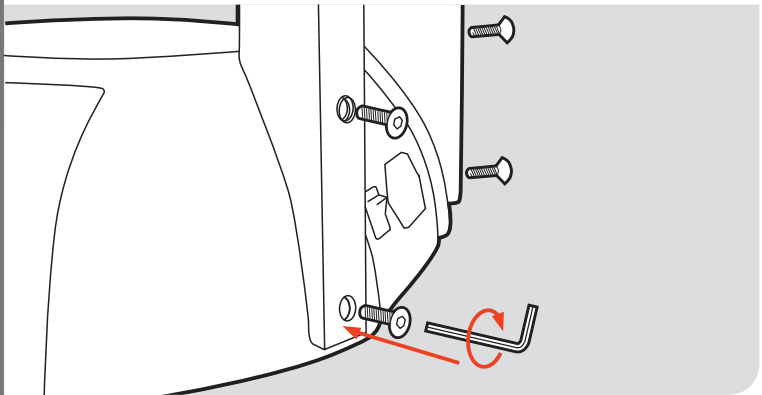

características básicas de Cavislim Advance

CAVISLIM ADVANCE es un dispositivo de alta tecnología que nos permite eliminar de una forma selectiva y eficiente las acumulaciones de grasa localizada (celulitis, piel de naranja) de nuestro cuerpo. La tecnología empleada es la de emisión de ultrasonidos, fenómeno físico conocido como cavitación, que provoca la eliminación de las células de grasa. Esta tecnología de contrastados resultados es ampliamente utilizada en centros de estética en todo el mundo para combatir de una forma indolora y no invasiva la celulitis.

El modelo YS70 incluye dos manipuladores para realizar dos tipos de tratamiento diferentes.

El manipulador **M80**, de mayor tamaño, para los tratamientos generales en todas las zonas del cuerpo. Dispone de 4 programas en modo pulsado y un programa en modo continuo con 5 niveles de intensidad diferentes.

Tiempo: programable de 1 a 15 minutos.

Intensidad: programable en 5 niveles de intensidad (5-10-15-20-25)

Modo: programable en 4 modos de trabajo pulsado (P1-P2-P3-P4) programable en 1 modo de trabajo continuo (P5)

El manipulador **M38**, de menor tamaño, especialmente diseñado para tratar las zonas de grasa más rebelde, ya que al ser su superficie más pequeña, la potencia queda más concentrada y su efecto es mayor. Dispone de 10 programas de modo pulsado y 4 niveles de intensidad diferentes. Dispone de la opción de encender una corona de leds para tener un mayor control sobre la zona que se está tratando.

Tiempo: programable de 1 a 15 minutos.

Intensidad: programable en 4 niveles de intensidad (1-2-3-4)

Modo: programable en 10 modos de trabajo pulsado (P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10)

En esta unidad únicamente deberá preocuparse de programar de forma sencilla tres funciones: intensidad, tiempo y modo de trabajo. Con la intensidad controlamos el nivel de penetración de las ondas sonoras en su piel. A más intensidad, mayor será la profundidad que alcancen las ondas.


La función tiempo le ayudará a elegir los minutos que usted quiere trabajar con CAVISLIM ADVANCE. Por razones de seguridad el tiempo que usted puede programar será de hasta 15 minutos que corresponde al tiempo máximo recomendado para trabajar una zona. Sin embargo usted puede reducir ese tiempo máximo en intervalos de 1 minuto. Una vez finalizado el tiempo seleccionado CAVISLIM ADVANCE le avisará con un pitido y un mensaje en el display con el texto "Tiempo Agotado". CAVISLIM ADVANCE también le permite elegir el modo de trabajo, que nos ayudará a seleccionar el intervalo de tiempo con el que las ondas llegan a nuestra piel.

instrucciones de uso de Cavilim Advance

Precauciones: Antes de comenzar a utilizar este aparato consulte a su médico. Esta advertencia es especialmente importante para personas con problemas de salud. No es recomendable su uso en menores de 18 años. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.

Puesta en marcha


- Procederemos a conectar los **manípulos** al **cuerpo central**. Para ello tomaremos la **clavija del manípulo pequeño** y la insertaremos en la conexión situada en el **cuerpo central**, del lado izquierdo, indicada con la fig. 2.1.
- Posteriormente tomaremos la **clavija del manípulo grande** y la insertaremos en la conexión situada en el **cuerpo central**, del lado derecho, indicada con la figura 2.2.
- Luego insertaremos la **clavija del pedal de accionamiento** en la conexión situada en el **cuerpo central**, del lado izquierdo, indicada con la fig. 2.3.
- Compruebe que todas las conexiones están realizadas de forma correcta antes de conectar a la red eléctrica.
- Por último conecte el cable de conexión eléctrica al conector de la máquina y el otro enchúfelo a la red eléctrica (220V) fig. 2.4. Ponga el interruptor de la máquina en posición (I) para poner la máquina en marcha.

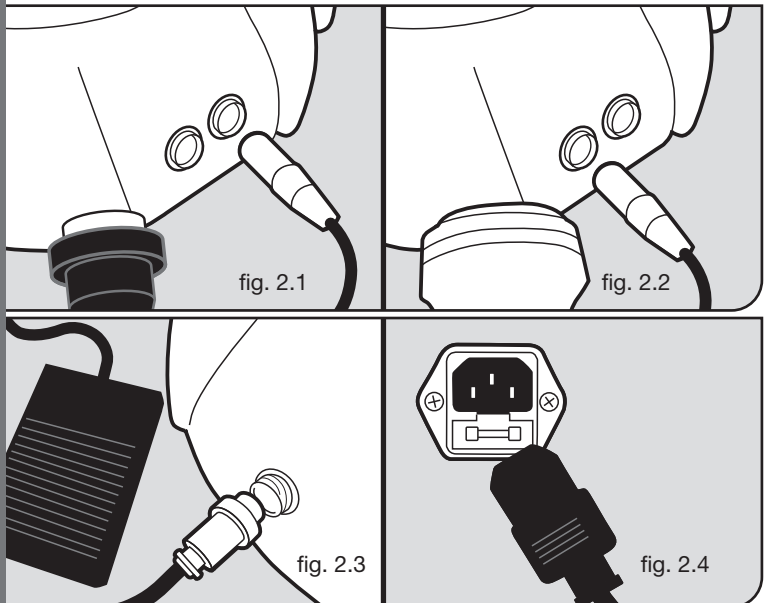

Elementos del monitor

El monitor de CAVISLIM ADVANCE está compuesto por una pantalla o display, un led, y cinco pulsadores o teclas.


- En el display se muestra información sobre la sesión de cavitación.
- El led encendido (luz verde) nos avisa de que el aparato está en funcionamiento.
- Las teclas tienen las siguientes funciones:
 - ▲ y ▼ cambio de modo de trabajo **MODE**
 - + y - ajuste de tiempo **TIME** y de intensidad **INTENSITY**.
 - || pausa y ▶ inicio de sesión.

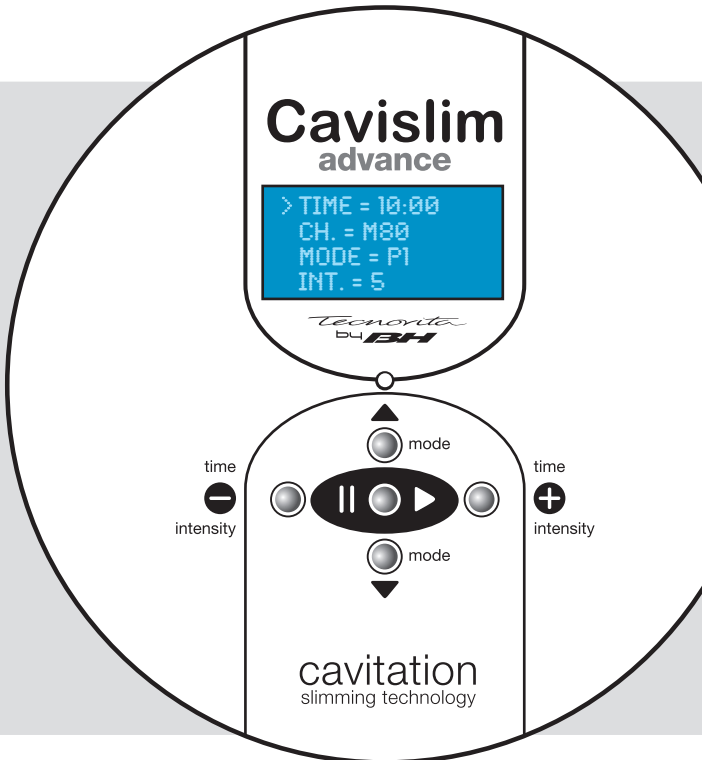

Sesión de cavitación

Las variables que intervienen en el masaje son 3:

- **Tiempo:** mide en minutos y segundos la duración de la sesión. Tiene la posibilidad de elegir de 1 a 15 minutos (intervalos de 1 minuto).
- **Modo de trabajo:** tipo de pulsados (frecuencia de emisión de impulsos). CAVISLIM ADVANCE permite seleccionar entre diferentes modos de trabajo de acuerdo al manipulador que se utilice:
 - **Manipulador grande** (CH. = M80), permite seleccionar entre 5 modos: P1, P2, P3, P4 y P5 (P1 muy baja – P4 muy alta, P5 continua)
 - **Manipulador pequeño** (CH. = M38), permite seleccionar entre 10 modos: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 y P10.
- **Intensidad:** representa el nivel de intensidad de la sesión. CAVISLIM ADVANCE permite seleccionar diferentes niveles de intensidad de acuerdo al manipulador que se utilice:
 - **Manipulador grande** (CH. = M80), permite seleccionar entre 5 niveles de intensidad: 5, 10, 15, 20 y 25.
 - **Manipulador pequeño** (CH. = M38), permite seleccionar entre 4 niveles de intensidad: 1, 2, 3, 4.

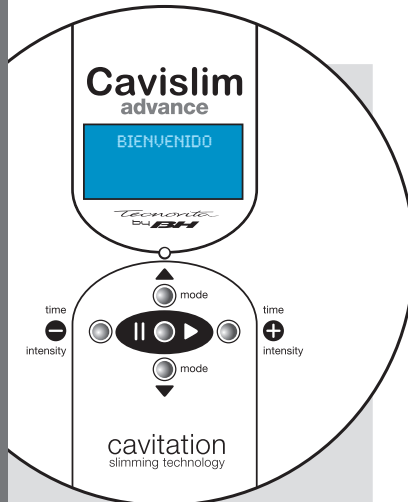

Comienzo de la sesión

Una vez conectada la máquina a la corriente eléctrica y puesto el interruptor en marcha (I) verá que le aparece en el monitor un mensaje: **BIENVENIDO**.

Este mensaje durará 3 segundos transcurridos los cuales le aparecerán, por defecto, los siguientes parámetros de trabajo:

TIME = 10:00
CH. = M80
MODE = P1
INT. = 5

A partir de aquí podrá modificar los parámetros tiempo, manípulo y modo de trabajo en busca de la sesión deseada de la siguiente forma:

Seleccione el parámetro a modificar con la pequeña flecha ubicada inicialmente junto al concepto TIME y que Ud. puede correr con las teclas **+** y **-**.

Variación de tiempo de la sesión


Una vez seleccionado el concepto TIME modifique la duración de la sesión con las teclas **+** y **-**.


El valor que aparece por defecto es 10 minutos pero se puede modificar en intervalos de 1 minuto entre los valores 1:00 y 15:00. Modifique el parámetro tiempo en cualquier momento durante la sesión.

Selección de manípulo

Una vez seleccionado el concepto CH se puede cambiar el manípulo a utilizar en la sesión con las teclas **+** y **-**.

Si se escoge el manípulo M38 Ud. elija si quiere que se enciendan las luces rojas de su cabezal, apuntando con las flechita el concepto **P**, y con **+** y **-** si las luces deben encenderse, letra **Y**, o deben estar apagadas, letra **N**.

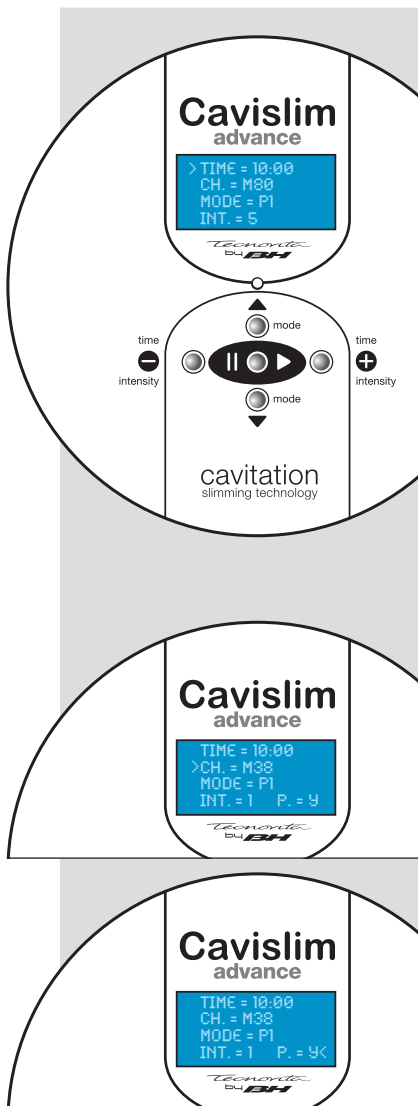


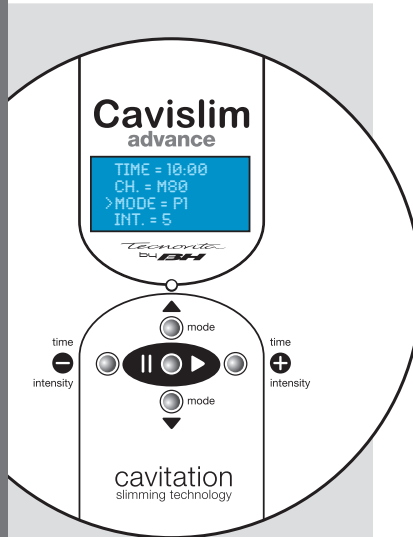

Variación del modo de trabajo

Una vez seleccionado el concepto **MODE** modifique el modo de trabajo con las teclas **+** y **-**

El valor que aparece por defecto es **P1** (frecuencia de emisión de impulsos muy baja) pero puede ser modificado seleccionando entre los valores **P1, P2, P3, P4** y **P5** (con el manipulador **M80**) y **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9** y **P10** (con el manipulador **M38**).

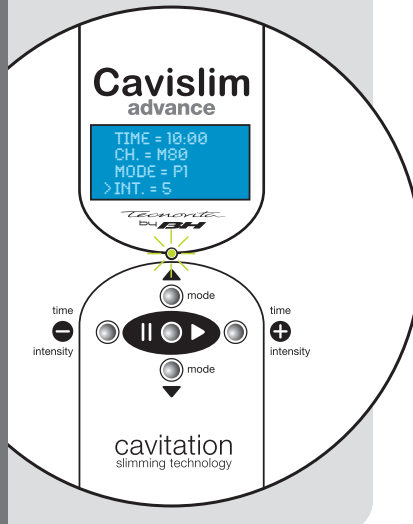

Variación de la intensidad de masaje

Una vez seleccionado el concepto **INT.** modifique la intensidad de masaje con las teclas **+** y **-**.

El nivel de intensidad que aparece por defecto es 5 pero se puede modificar seleccionando entre los niveles 5, 10, 15, 20 y 25 (con el manipulador **M80**) o seleccionando entre los niveles 1, 2, 3 y 4 (con el manipulador **M38**).

Finalmente, debe pulsar la tecla ► y, una vez puesta en marcha la máquina (se enciende una luz verde en la parte central de la unidad), agarre firmemente el manípulo, colóquelo en la zona que desea trabajar y pise el pedal para comenzar su sesión de cavitación.

Al pisar el pedal verá que el tiempo va disminuyendo en la pantalla y comienza la emisión de impulsos del manípulo seleccionado. Coloque el manípulo en la zona que desea trabajar y masajee como se indica en el DVD o en “modos de aplicación”.


Si desea pausar la sesión, basta con dejar de pisar el pedal y la emisión de impulsos se parará inmediatamente.

Cuando el contador del tiempo llegue a **0:00** la unidad parará y emitirá una serie de pitidos para avisarle que ha terminado la sesión seleccionada. Podrá ver en el monitor el siguiente mensaje:

**TIEMPO AGOTADO
PULSE UNA TECLA
PARA COMENZAR**

Al pulsar cualquier tecla de la máquina, la pantalla volverá a su configuración por defecto:

**TIME = 10:00
CH. = M80
MODE = P1
INT. = 5**

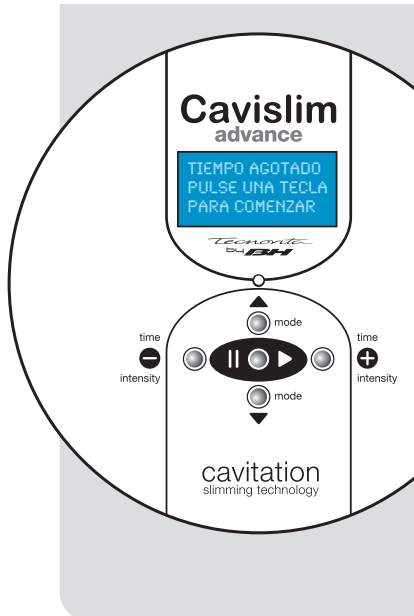

capítulo 3

modos de aplicación

Aplíquese siempre gel de forma abundante en la zona que desee trabajar y comience a tratarla deslizando el manipulador lentamente y sin apretar, tal como muestran los dibujos.


Si necesita adquirir gel o alguna de nuestras cremas de preparación lo podrá hacer en el establecimiento donde compró CAVISLIM ADVANCE o en nuestra página web: www.tecnovita.eu

En cada uno de los apartados siguientes encontrará un cuadro con los protocolos de uso. Ud. deberá determinar en qué nivel de grasa se encuentra en cada zona donde se va a tratar.

- A** Gran acumulación de grasa de densidad alta.
- B** Gran acumulación de grasa de densidad media
- C** Acumulación media de grasa de densidad media
- D** Acumulación pequeña de grasa
- E** Piel de naranja
- F** Sesión de mantenimiento

abdomen central

Ponga gel de forma abundante sobre su abdomen y comience a trabajar la zona deslizando el manipulador lentamente y sin apretar, tal como muestra los dibujos.

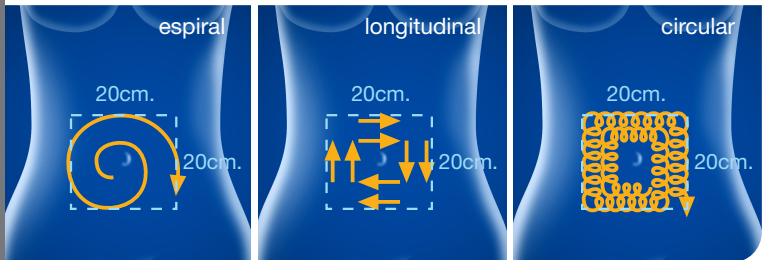


Para conseguir un mejor resultado, le recomendamos aplique CAVISLIM ADVANCE combinando las distintas técnicas de masaje (espiral, longitudinal, circular) en diferentes sesiones. Le recomendamos recostarse para una más confortable aplicación de CAVISLIM ADVANCE.

Nivel	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	15	9	3	10'
B	3	15	9	3	10'
C	3	10	8	2	7'
D	2	10	8	1	7'
E	2	10	7	1	7'
F	2	10	6	1	7'

Recuerde que nunca debe aplicar CAVISLIM ADVANCE sobre el ombligo, pechos, zona torácica y zona genital

flancos

ES

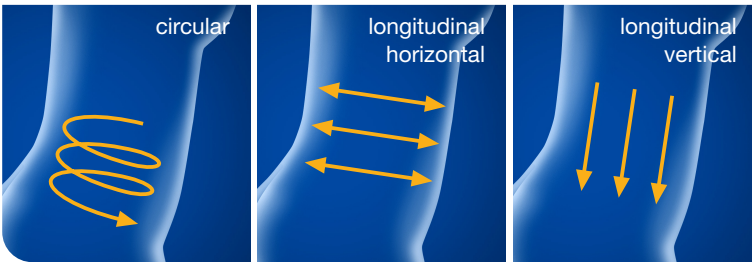


Aplique gel sobre la piel de la zona a trabajar con CAVISLIM ADVANCE

Tanto el masaje circular como el masaje longitudinal deberán aplicarse de arriba abajo tal como muestran los dibujos. Es importante respetar las direcciones del masaje ya que con ello favorecemos el drenaje. Combine las distintas técnicas de masaje en diferentes sesiones.

Nivel	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	4	20	7	3	10'
B	3	15	7	3	10'
C	2	10	6	2	7'
D	1	5	4	1	7'
E	1	5	4	1	5'
F	1	5	4	1	5'

caderas

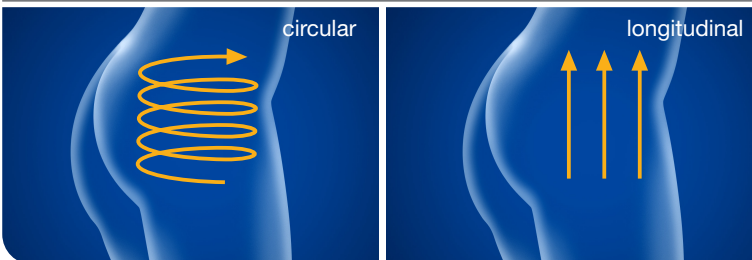


Aplique gel sobre la zona a trabajar con CAVISLIM ADVANCE

Tanto el masaje circular como el longitudinal deberán aplicarse de abajo arriba tal como muestran los dibujos. Durante el tratamiento incida sobre la zona de mayor acumulación de grasa.

Nivel	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	15	9	3	7'
B	2	15	8	3	7'
C	2	10	8	2	7'
D	1	5	6	2	5'
E	1	5	4	1	5'
F	1	5	4	1	5'

glúteos

Aplique gel sobre la zona a trabajar con CAVISLIM ADVANCE

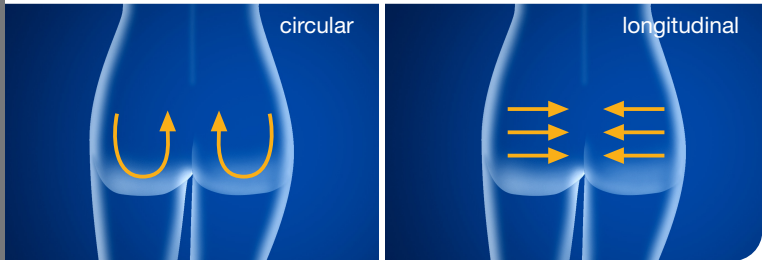


Tanto el masaje longitudinal como el circular deberán realizarse siguiendo el sentido de las flechas tal como se muestra en los dibujos.

Nivel	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	5	25	9	4	10'
B	5	20	8	3	7'
C	4	20	7	3	7'
D	3	15	6	2	7'
E	2	15	6	2	10'
F	2	15	5	2	10'

interior del muslo

Recuerde no aplicar nunca CAVISLIM ADVANCE de la rodilla hacia el pie ya que en esa zona no se producen acumulaciones significativas de grasa.


Aplique gel sobre la zona a trabajar con CAVISLIM ADVANCE

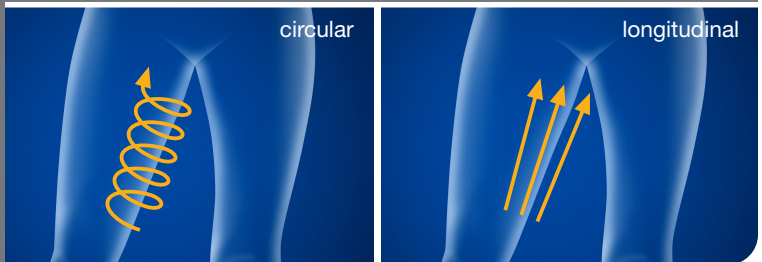

Tanto el masaje longitudinal como el circular deberán realizarse de abajo arriba, tal como muestran los dibujos. Seguir estas sencillas instrucciones le ayudará a una mejora en los resultados.

Nivel	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	15	8	2	10'
B	3	15	8	2	10'
C	2	10	6	2	7'
D	2	10	6	2	7'
E	2	10	4	2	7'
F	2	5	3	1	7'

interior de la rodilla

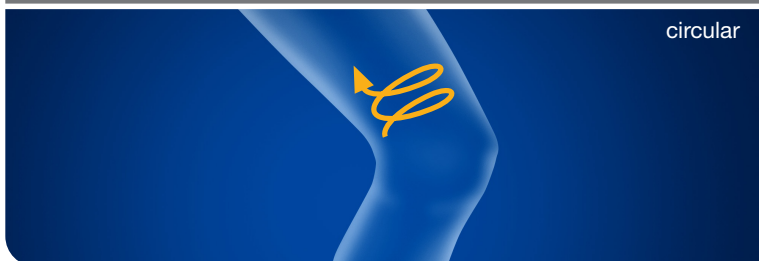


En esta zona aplicaremos un ligero masaje circular tal como se muestra en el dibujo.

Nivel	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	5	7	2	10'
B	3	5	7	2	10'
C	2	5	6	1	7'
D	2	5	4	1	7'
E	1	5	1	1	7'
F	1	5	1	1	7'

Recuerde no aplicar el CAVISLIM ADVANCE sobre las articulaciones de la rodilla.
Aplique gel sobre la zona a trabajar con el CAVISLIM ADVANCE.

brazos

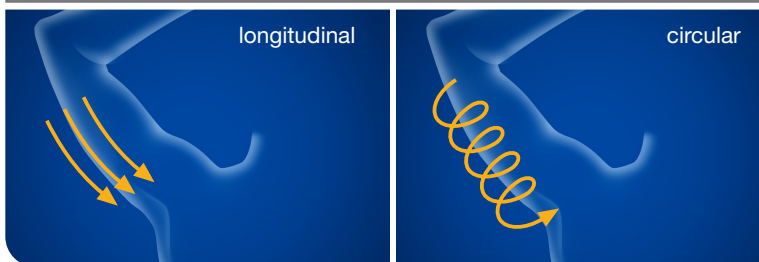

Asegúrese de poner gel de forma generosa en la zona que vaya a trabajar ya que mejorará la efectividad del tratamiento y evitará dañar la máquina. Realice el masaje, deslizando el manipulador lentamente y sin apretar. El masaje de esta zona siempre se deberá aplicar en dirección hacia el cuerpo tal como muestra el dibujo.

Nivel	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	2	5	6	1	7'
B	2	5	4	1	5'
C	1	5	2	1	5'
D	1	5	2	1	3'
E	1	5	1	1	3'
F	1	5	1	1	5'

Recuerde nunca aplicar CAVISLIM ADVANCE en la zona de manos, antebrazo y articulaciones

capítulo 4

para una correcta y segura aplicación de Cavislim Advance

Para una correcta y segura aplicación de CAVISLIM ADVANCE debe tener en cuenta los siguientes tiempos de aplicación:

- **Por zona de trabajo: Máximo 15 minutos.**

Entendemos por “zona de trabajo” cada una de las partes de nuestro cuerpo donde podemos aplicarnos CAVISLIM ADVANCE. Las distintas zonas de trabajo son: brazos, abdomen, flancos, caderas, interior de muslos e interior de rodilla.

Ej: en una misma sesión se podrá realizar la aplicación de CAVISLIM ADVANCE durante 15 minutos en flancos y 15 minutos en brazos. Pero, por ejemplo, NUNCA debería realizarse en un mismo día una sesión de 30 minutos de aplicación sólo en flancos.

- **Por sesión: Máximo 30 minutos.**

Entendemos por sesión la aplicación de CAVISLIM ADVANCE en un mismo día en 2 zonas de trabajo diferentes (máximo de 15 minutos por zona).

- **Entre sesiones: Mínimo de 72 horas.**

Entendemos por “entre sesiones” el tiempo que debe transcurrir entre sesión y sesión.

Ej: en una semana, una planificación de sesiones (la máxima) sería: lunes, jueves y domingo.

- **Cada 20 sesiones:**

Se deberá descansar durante 3 semanas.

Tras ese periodo se podrá repetir completamente el primer tratamiento, o bien comenzar el programa de mantenimiento.

- **Sesiones de mantenimiento:**

Depende de cada individuo, pero una sesión al mes sería suficiente.

MUY IMPORTANTE

- **Nunca sobrepase los tiempos de aplicación (15 minutos por zona, 30 minutos en total al finalizar el día).** Su cuerpo no sabe “de dónde” está usted eliminando la grasa, por lo que no puede realizar en una sesión aplicaciones de 15 minutos en flancos y 15 minutos en piernas y 15 minutos en brazos, etc. **RECUERDE:** en total, el tiempo máximo en un día, sumando todas las partes del cuerpo a tratar, debe ser de 30 minutos.

- **Y, sobre todo, respete el tiempo de descanso de 72 horas entre sesiones.** Es el tiempo que su cuerpo necesita para eliminar a través del sistema linfático toda la grasa que ha sido disuelta durante la sesión.

preguntas frecuentes sobre Cavislim

¿Qué es la cavitación?

La cavitación es una técnica no invasiva (sin cirugía) para moldear el cuerpo que reduce volumen eliminando la celulitis y los depósitos de grasa localizada en abdomen, caderas, flancos, brazos, cara interna de muslos y rodillas.

¿Qué ventajas tiene sobre otros métodos?

La ventaja fundamental es que podemos elegir las zonas determinadas del cuerpo que queremos trabajar. Se puede decir que es una tecnología que nos permite trabajar la celulitis de forma selectiva.

¿Es la cavitación dolorosa?

El uso de CAVISLIM ADVANCE nunca debe provocar dolor.

¿Es normal escuchar un pequeño zumbido en los oídos durante el uso de CAVISLIM ADVANCE?

Sí, en algunos usuarios es posible que perciban un pequeño zumbido durante su aplicación.

¿Se puede utilizar en todas las partes del cuerpo?

No se puede aplicar en todas las partes del cuerpo. En ningún caso se debe aplicar: sobre cabeza o cara, cuello, senos, zona torácica, ombligo, antebrazo, articulaciones, genitales, espalda, tobillos ni ganglios.

¿Con CAVISLIM ADVANCE se pierde peso o volumen?

CAVISLIM ADVANCE elimina los cúmulos de materia grasa los cuales tienen peso y al mismo tiempo fruto de su desaparición nuestro cuerpo pierde volumen.

¿Es CAVISLIM ADVANCE efectivo con la piel de naranja?

Sí, CAVISLIM ADVANCE es eficaz con la piel de naranja al destruirse las células adiposas causantes del almacenamiento de grasa.

¿CAVISLIM ADVANCE sirve para quitar las arrugas?

CAVISLIM ADVANCE no es un sistema creado para la eliminación de arrugas.

¿Se puede usar CAVISLIM ADVANCE en la cara?

No se debe utilizar NUNCA CAVISLIM ADVANCE en la cara, ojos ni cuello.

¿Con cuantas sesiones se empiezan a ver los resultados?

Se deberían observar resultados a partir de las primeras cinco sesiones, sin embargo los resultados pueden variar dependiendo del sujeto.

¿Cuántos días debe esperarse entre sesión y sesión?

Se recomienda dejar 72 horas entre sesión y sesión.

¿Es necesario combinar CAVISLIM ADVANCE con alguna dieta?

No es necesario seguir ninguna dieta especial, sin embargo es altamente recomendable llevar una alimentación equilibrada e hidratarse convenientemente.

¿Cuánto agua debo beber?

Es imprescindible comenzar a hidratarse dos horas antes de aplicar CAVISLIM ADVANCE. También después de la finalizar es aconsejable seguir hidratándose.

Se recomienda ingerir un mínimo de 2 litros durante estos periodos ya que ayuda a la eliminación de toxinas.

¿Es necesario combinar CAVISLIM ADVANCE con la práctica deportiva?

No es estrictamente necesario, pero la práctica de al menos 30 minutos de alguna actividad física potencia los resultados al ayudar al drenaje de líquidos.

¿Qué prácticas deportivas se complementan con CAVISLIM ADVANCE?

La plataforma vibratoria es el complemento ideal por sus cualidades tonificantes y drenantes. Pero si no tiene acceso a la plataforma, un paseo, bicicleta estática, natación u otro ejercicio aeróbico realizado durante un mínimo de 30 minutos son de gran ayuda. natación u otro ejercicio aeróbico realizado durante un mínimo de 30 minutos son de gran ayuda.

¿Cómo puedo potenciar los efectos de CAVISLIM ADVANCE?

Conjugando una dieta equilibrada con la práctica habitual de deporte y la ingesta abundante de agua. Además los masajes de drenaje son de gran ayuda.

¿Para qué valen los geles anticelulítico y reafirmante? ¿Cuándo los uso?

1. Gel Anticelulítico: Contiene principios activos que ayudan a la eliminación de la celulitis.

2. Gel Reafirmante: Contiene principios activos que reafirman la zona tratada. La secuencia de aplicación es la siguiente: durante los primeros días del tratamiento utilizamos el gel anticelulítico y una vez que se empiezan a notar los resultados, utilizamos el gel reafirmante. Se aplican antes del gel de cavitación, como cualquier otro serum. Se debe masajear la zona hasta que se absorba bien y luego se aplica abundante gel de cavitación, para comenzar la sesión.

¿Puedo utilizar CAVISLIM ADVANCE sin aplicar gel?

NUNCA, ya que el gel actúa como agente conductor de los ultrasonidos sonido con su cuerpo. Si no utilizamos gel la aplicación de CAVISLIM ADVANCE pierde su efectividad y la maquina puede resultar seriamente dañada.

¿Puedo utilizar cualquier tipo gel?

Recomendamos utilizar únicamente gel TECNOVITA by BH ya que el uso de cualquier otro podría dañar la maquina.

¿Vuelve a aparecer la celulitis tras utilizar CAVISLIM ADVANCE?

Aunque CAVISLIM ADVANCE asegura eficacia y durabilidad a lo largo del tiempo no podemos garantizar que no vuelva a aparecer. Para evitar la nueva aparición de celulitis se recomienda una dieta equilibrada, beber mucho agua, la práctica regular de ejercicio físico y sesiones de mantenimiento con CAVISLIM ADVANCE.

¿Tiene efectos secundarios?

Si usted está sano, CAVISLIM ADVANCE no tiene ningún efecto secundario descrito, sin embargo en algunas personas puede producir un enrojecimiento

¿Cuándo esta contraindicado el uso de CAVISLIM ADVANCE?

- Si se encuentra embarazada o cree estarlo.
- Si se encuentra en período de lactancia.
- Tratamientos de fertilidad.
- Si presenta cardiopatía de cualquier tipo.
- Si tiene problemas dermatológicos.
- Osteoporosis.
- Fibromialgia.
- Tumores malignos.
- Hipertensión.
- Niveles de colesterol altos.
- Insuficiencias renales.
- Insuficiencias físicas.
- Implantes metálicos o prótesis.
- Malformaciones físicas.
- Epilepsia.
- Tratamiento prolongado con medicamentos: anti-inflamatorios, anticoagulantes, antibióticos o antihistamínicos.
- Depresión.
- Tratamiento psiquiátrico o psicológico.
- Problemas hepáticos (hígado graso)...
- Colon irritable.
- Diabetes.

¿Puedo utilizar CAVISLIM ADVANCE si estoy embarazada?

No debe NUNCA usar CAVISLIM ADVANCE si está embarazada o cree estarlo.

¿Puedo usar CAVISLIM ADVANCE durante la lactancia?

No utilizar durante el periodo de lactancia.

¿Puedo aplicar CAVISLIM ADVANCE en los senos?

NUNCA se debe aplicar sobre los senos.

¿Puedo utilizar CAVISLIM ADVANCE durante la menstruación?

No es recomendable su aplicación durante ese período sobre la zona abdominal ya que puede producir un aumento del sangrado. Sin embargo puede aplicarse en otras zonas.

¿Puedo usar CAVISLIM ADVANCE llevando DIU?

Sí.

¿Puede afectar CAVISLIM ADVANCE a mis niveles colesterol?

El uso de CAVISLIM ADVANCE puede aumentar sus índices de colesterol.

¿Se puede usar CAVISLIM ADVANCE con afecciones de piel?

No se debe utilizar si tiene alguna afección en la piel. Consulte a su médico.

¿Puedo usar CAVISLIM ADVANCE si tengo implantes de oído?

No se debe utilizar en caso de tener implantes.

¿Puedo usar CAVISLIM ADVANCE cuando me estoy bañando o duchando?

Bajo ningún concepto el manipulador ni la máquina deben entrar en contacto con el agua ya que existe el riesgo shock eléctrico.

¿Cómo debo limpiar CAVISLIM ADVANCE y el manipulador?

Para limpiar CAVISLIM ADVANCE o el manipulador, nunca los sumerja en agua. Utilice un paño ligeramente humedecido con agua.

capítulo 6

información importante de seguridad

Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor de tierra y un enchufe con toma de tierra. Si no funciona correctamente o se ha averiado, la conexión a tierra proporciona un recorrido de menor resistencia para la corriente eléctrica y reduce el riesgo de descargas eléctricas.

¡PELIGRO! Una conexión incorrecta del conductor del equipo a tierra puede dar como resultado el riesgo de descargas eléctricas. No modifique el enchufe que incluye el aparato. Si no encaja en la toma eléctrica solicite a un electricista la instalación de una toma adecuada.

Este producto debe utilizarse en un circuito de 220-240 voltios y tiene una clavija de tierra similar a la que se muestra en la fig. 6.1 Siga estas recomendaciones:

1. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
2. No utilice la máquina con el cable eléctrico dañado o desgastado.
3. Mantenga el cable eléctrico lejos de superficies calientes.
4. Nunca utilice la máquina al aire libre.
5. Para desenchufar, ponga el interruptor en la posición «0» y entonces desenchufe de la red.



Protección

Este modelo esta dotado de una protección electrónica de parada automática para una óptima conservación de los circuitos tanto electrónicos como eléctricos.

Esta protección se activará (fusible) si la unidad es sometida a un esfuerzo o calentamiento anormal.

Si esto ocurriese:

1. Desconecte la unidad de la red eléctrica.
2. Ponga el interruptor (L) situado en la carcasa en la posición «0» (OFF) fig. 6.2.
3. Cambie el fusible (C) (1 Amp).
4. Conecte la unidad a un enchufe provisto de terminal TIERRA. Ponga el interruptor (L) en posición «I» (ON) fig. 6.2

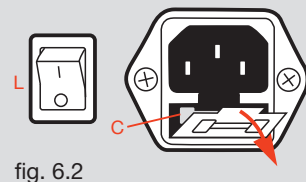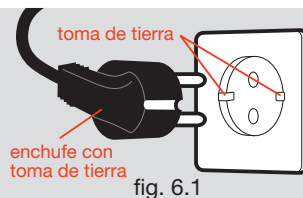

Sugerimos que lea atentamente este ejemplar para conocer con exactitud la cobertura de la garantía otorgada por el fabricante y sus responsabilidades como propietario

GARANTÍAS

INFORMACIÓN GENERAL

EXERCYCLE, S.L., desea agradecerle la compra de este producto y la confianza que ha depositado en nosotros. Nuestros productos han sido sometidos a un riguroso control de calidad. No obstante, si tuviera algún problema con este aparato durante el periodo de garantía, le rogamos leer atentamente las condiciones de garantía y se ponga en contacto con el distribuidor autorizado de su zona.

El presente certificado de garantías ha sido redactado de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 1999/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de mayo de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y garantía de los bienes de consumo, incorporada al derecho español en virtud de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de garantías en la venta de bienes de consumo. En este sentido, EXERCYCLE, S.L., provista de NIF B-01029032 y con domicilio en Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garantiza este producto en los siguientes términos y condiciones:

1. PERIODO DE GARANTIA

El producto amparado por este certificado está protegido durante un período de DOS (2) AÑOS contados desde la entrega del producto, entendiéndose por tal la fecha que figura en el ticket o factura justificada de la compra del producto, o en el albarán de entrega correspondiente si éste fuese posterior. Es imprescindible, para posibles reparaciones la presentación de la misma. La política respecto al período de garantía puede variar entre países diferentes. El período de garantía indicado es solamente aplicable para Europa.

2. DERECHOS QUE CUBRE LA GARANTÍA

- Reparación o sustitución del producto que, en su caso, se llevará a cabo en un plazo razonable y sin mayores inconvenientes para el consumidor, habida cuenta de la naturaleza del producto y de la finalidad que tuviera para el consumidor.
- Se exceptúan aquellos supuestos en los que la reparación o sustitución imponga al vendedor costes que no sean razonables en comparación con otras formas de saneamiento, cuando las mismas no perjudiquen al consumidor.
- Las reparaciones serán gratuitas para el consumidor en los conceptos de mano de obra, desplazamiento y materiales.
- En el caso de reparación o sustitución de una máquina por otra nueva, el plazo de garantía se suspende temporalmente hasta la entrega de ese nuevo aparato y se dispondrá siempre como mínimo de 6 meses de garantía, pero en ningún caso empieza un periodo nuevo de 2 años.

-Asimismo, se producirá una (i) rebaja del precio o se procederá a la (ii) resolución del contrato, a elección del consumidor, cuando la reparación o sustitución no se hayan llevado a cabo en plazo razonable o sin mayores inconvenientes para el consumidor. La (i) rebaja del precio, será proporcional a la diferencia existente entre el valor que el bien hubiera tenido en el momento de la entrega de haber sido conforme con el contrato y el valor que el bien efectivamente entregado tenía en el momento de dicha entrega. La (ii) resolución no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia.

3. LA GARANTIA NO CUBRE

- Defectos atribuibles al empleo diferente al establecido en el Manual de Usuario.

- El uso a título profesional o el arrendamiento a título comercial del producto.
- Mala instalación, mal montaje o rotura de piezas por montaje inadecuado, (revise el Manual de Usuario donde se detallan las recomendaciones para la instalación y uso de la máquina).

- Uso indebido del producto (utilización sin aplicación de gel, exceder tiempos de utilización, exposición a humedad demasiado elevada, etc.) o problemas derivados de una falta de mantenimiento (acumulación de suciedad en cualquier parte del producto o sus accesorios, etc.) (revise el Manual de Usuario donde se detallan las recomendaciones para la instalación y uso del producto).

- Reparaciones realizadas por personal no autorizado por EXERCYCLE, S.L. o aparatos abiertos o manipulados por personas no autorizadas por el fabricante.

- Desviaciones del producto estándar, como ligeras vibraciones, ruidos o roturas de piezas que no afecten al funcionamiento de su máquina y que no sean atribuibles a un defecto de fabricación.

- Arañazos, rasguños, abrasiones, golpes, caídas, etc, provocadas por un mal cuidado.

- Defectos en el aparato causados por daños en el transporte del mismo.

4. VIA DE RECLAMACION

- La acción para reclamar por falta de conformidad prescribe a los tres años desde la entrega del bien.

- El consumidor debe informar de la existencia del defecto en el plazo de 2 meses a contar desde que tuvo conocimiento de su existencia.

- Esta Garantía no afecta a otros derechos legales del consumidor, conforme a la legislación vigente, si bien es incompatible con el ejercicio de otras acciones derivadas del saneamiento por vicios ocultos en la compraventa.

- Para cuantas cuestiones puedan surgir con motivo de la interpretación o ejecución de la presente garantía, se estará a lo establecido en la legislación nacional que sea de aplicación.

Cualquier discrepancia que pudiera surgir de la interpretación, validez y ejecución de este contrato, será resuelta en los juzgados y tribunales de la ciudad de Vitoria.

certificados

Por medio de la presente Exercycle S.L. declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de las Directivas 2004/108/CE y 2006/95/CE.

despiece

ES

1 Pedal de accionamiento




2 Manípulo M80




17 Manípulo M38




3 Soporte de manípulos

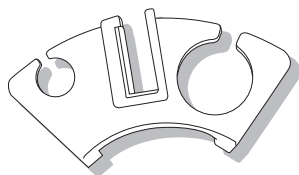

G01 Cuerpo central

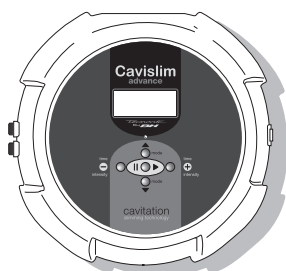

16 Cable de conexión a la red

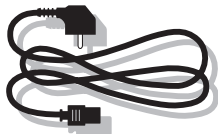

Para pedir un repuesto indicar: Código/Cantidad

Nº	Código
1	YS50001
2	YS50002
3	YS70003
16	YS50016
17	YS70017
G01	YS70G01

Ejemplo:

YS50001	1
---------	---

especificaciones técnicas

Peso Neto: 7 kg

Medidas: 34 cm L. x 38 cm An. x 13 cm Al.

Ultrasonidos: 40 KHz

Potencia de salida: máximo 25 vatios (según programa)

Fuente de alimentación: Voltaje: AC 220V / Frecuencia 50 Hz

contenúdos

capítulo 1

- conteúdo da embalagem
- montagem da CAVISLIM ADVANCE

capítulo 2

- características básicas da CAVISLIM ADVANCE
- instruções de utilização.

capítulo 3

- modos de aplicação

capítulo 4

- para uma correcta e segura aplicação da CAVISLIM ADVANCE

capítulo 5

- perguntas frequentes sobre a CAVISLIM ADVANCE


capítulo 6

- informação importante de segurança
- garantia
- certificados
- especificações técnicas
- componentes


conteúdo da embalagem

Nesta embalagem encontrará tudo o que necessita para poder usufruir da sua CAVISLIM ADVANCE a partir deste momento. Comprove minuciosamente com a seguinte lista todos os elementos que a sua embalagem deve conter.

Suporte de manípulos

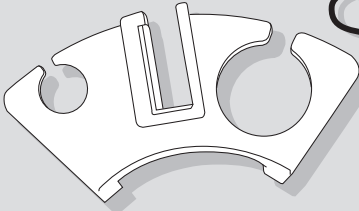


Manípulo M80

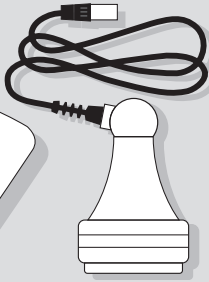


Manípulo M38



Corpo central

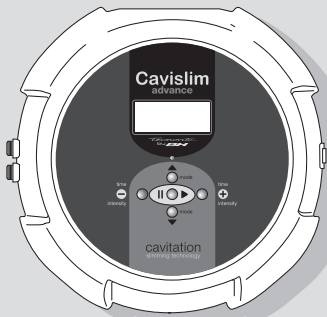


Pedal de accionamento

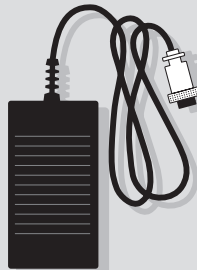

DVD



Manual do utilizador

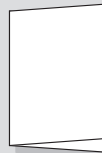

Gel de cavitação




Chave Allen



4 Parafusos



Cabo de ligação à rede

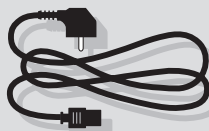

Sérum anticelulítico




Sérum reafirmante



montagem da Cavislim Advance

Primeiro vamos a proceder à montagem do **suporte dos manípulos** no **corpo central**. Para isso, colocaremos o corpo central sobre uma mesa e posicionaremos o **suporte dos manípulos** introduzindo os parafusos tal como mostra a figura em anexo.

Com a ajuda da **chave Allen** ajustaremos firmemente os **parafusos** até que as duas peças fiquem perfeitamente unidas.

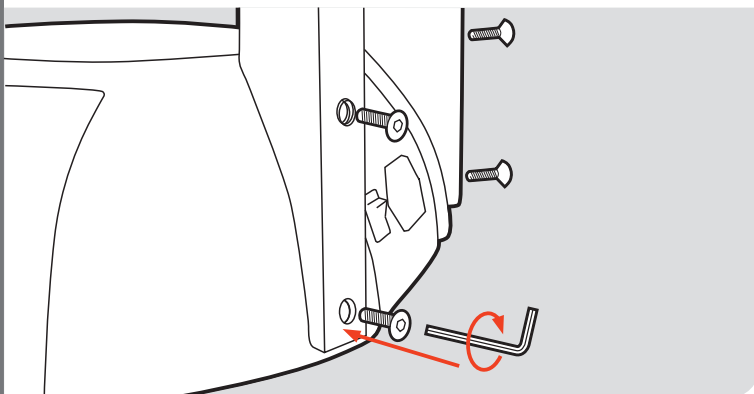

características básicas da Cavislim Advance

A CAVISLIM ADVANCE é um dispositivo de alta tecnologia que nos permite eliminar de uma forma selectiva e eficiente as acumulações de gordura localizada (celulite, pele de laranja) do nosso corpo.

A tecnologia utilizada é a emissão de ultra-sons, fenómeno físico conhecido como cavitação, que provoca a eliminação das células de gordura. Esta tecnologia com resultados comprovados é amplamente utilizada nos centros de estética de todo o mundo para combater a celulite de uma forma indolor e não invasiva.

O modelo YS70 inclui 2 manípulos que permitem efectuar 2 tipos de tratamentos diferentes.

O manípulo **M80**, de maior dimensão, para os tratamentos gerais, em todas as zonas do corpo. Dispõe de 4 programas em modo de palpação e 1 programa em modo contínuo, com 5 níveis de intensidade diferentes.

Tempo: Programável de 1 a 15 minutos.

Intensidade: Programável em 5 níveis de intensidade (5-10-15-20-25)

Modo: Programável em 4 modos de trabalho de palpação (P1-P2-P3-P4)

Programável em 1 modo de trabalho contínuo (P5)

O manípulo **M38**, de menor dimensão, foi especialmente desenhado para tratar as zonas de gordura mais rebelde, dado que a sua superfície é mais pequena e a potência está mais concentrada, pelo que o seu efeito é maior. Dispõe de 10 programas de modo de palpação e 4 níveis de intensidade diferentes. Dispõe da opção de acender uma coroa de leds e desta forma tem um maior controlo sobre a zona que está a ser tratada.

Tempo: Programável de 1 a 15 minutos.

Intensidade: Programável em 4 níveis de intensidade (1-2-3-4)

Modo: Programável em 10 modos de trabalho de palpação (P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7-P8-P9-P10)

Nesta unidade apenas deverá preocupar-se em programar de forma simples três funções: intensidade, tempo e modo de trabalho.

Com a intensidade controlamos o nível de penetração das ondas sonoras na sua pele. Com mais intensidade, maior será a profundidade de penetração e o alcance das ondas.

A função tempo ajudará a escolher o período de tempo em minutos de operação da CAVISLIM ADVANCE. Por razões de segurança, o período máximo de tempo que o aparelho permite programar é de até 15 minutos, que corresponde ao período de tempo máximo recomendado para trabalhar uma determinada zona. No entanto, poderá reduzir o referido período máximo de tempo em intervalos de 1 minuto. Uma vez finalizado o período de tempo seleccionado, a CAVISLIM ADVANCE emitirá um sinal de aviso sonoro e apresentará uma mensagem no ecrã com o texto "Tempo Esgotado". A CAVISLIM ADVANCE também permite escolher o modo de trabalho, que nos ajudará a seleccionar o intervalo de tempo com que as ondas chegam à nossa pele.


instruções de utilização da Cavislim Advance

Precauções: Antes de começar a utilizar este aparelho, consulte o seu médico. Esta advertência é especialmente importante para pessoas com problemas de saúde. O uso deste aparelho não é recomendado para menores de 18 anos. Mantenha este aparelho fora do alcance das crianças.

Colocação em funcionamento

- Procede-se à ligação dos manípulos ao **corpo central**. Para isso, inserir a **ficha do manípulo M38** na ligação situada no lado esquerdo do **corpo central**, indicado com a figura 2.1
 - Posteriormente, inserir a **ficha do manípulo M80** na ligação situada no lado direito do **corpo central**, indicado com a figura 2.2
 - Em seguida, inserir a **ficha do pedal de accionamento** na ligação situada no lado esquerdo do **corpo central**, indicado com a fig. 2.3
- Verificar se todas as ligações foram correctamente efectuadas antes de ligar o aparelho à rede eléctrica.
- Para terminar, ligar o terminal do cabo de alimentação eléctrica à respectiva ficha na máquina e o terminal de alimentação à tomada da rede eléctrica (220V.) 2.4


Colocar o interruptor na posição (I) colocando o aparelho em funcionamento.

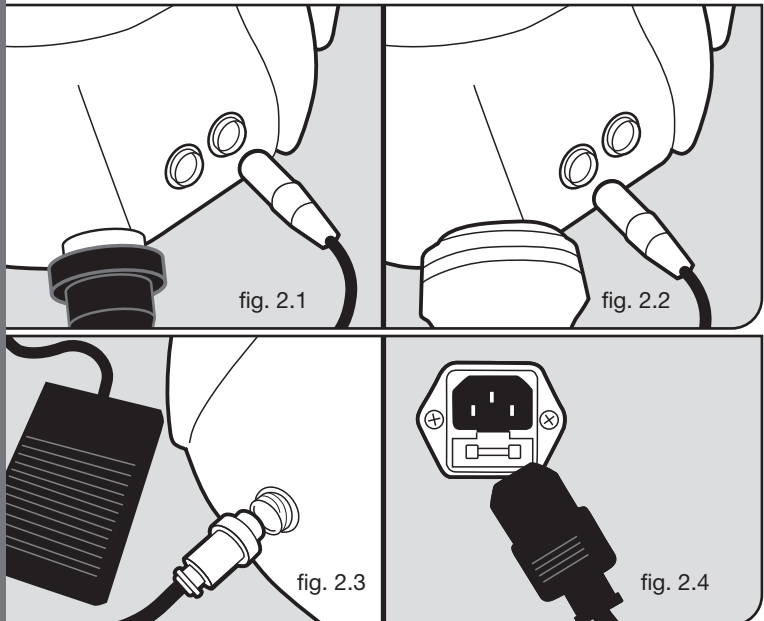

Elementos do monitor

O monitor da CAVISLIM ADVANCE é composto por um ecrã ou monitor, um led e cinco botões ou teclas.

- No monitor é apresentada a informação sobre a sessão de cavitação.
- O led aceso (luz verde) indica que o aparelho está em funcionamento.
- As teclas têm as seguintes funções:
 - ▲ e ▼ alteração de modo de trabalho **MODE**.
 - + e - ajuste de tempo **TIME** e de intensidade **INTENSITY**.
 - || pausa e ► início de sessão.

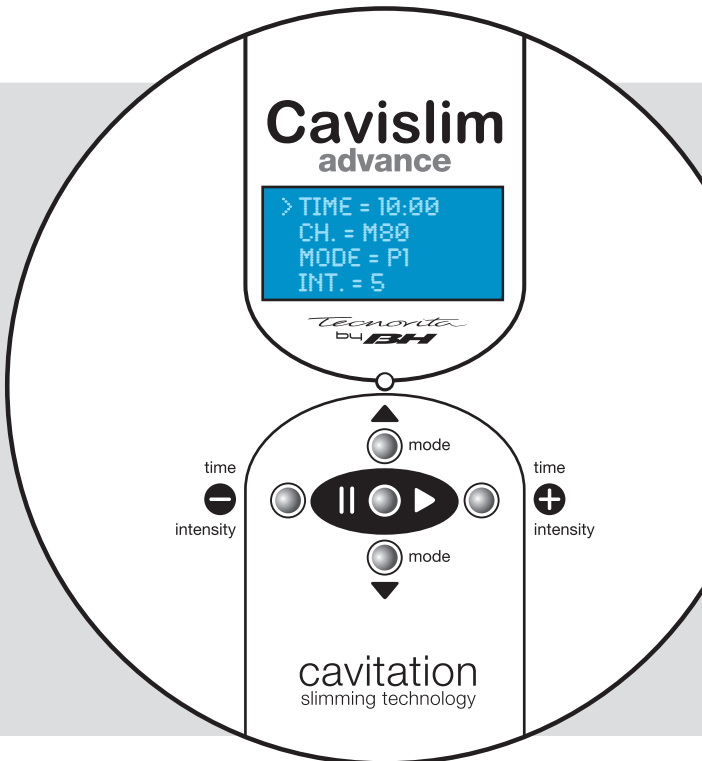

Sessão de Cavitação

As variáveis que intervêm na massagem são 3:


- **Tempo:** mede em minutos e segundos a duração da sessão. Permite escolher um período entre 1 e 15 minutos (em intervalos de 1 minuto).
- **Modo de trabalho:** tipo de palpitações (frequência de emissão de impulsos).

A CAVISLIM ADVANCE permite seleccionar entre diferentes modos de trabalho de acordo com o manípulo que seja utilizado:

- **Manípulo grande** (CH. = M80), permite seleccionar entre 5 modos: P1, P2, P3, P4 y P5 (P1 muito baixa – P4 muito alta, P5 contínua)
- **Manípulo pequeno** (CH. = M38), permite seleccionar entre 10 modos: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 e P10.

- **Intensidade:** representa o nível de intensidade da sessão. A CAVISLIM ADVANCE permite seleccionar diferentes níveis de intensidade de acordo com o manípulo que seja utilizado:

- **Manípulo grande** (CH. = M80), permite seleccionar entre 5 níveis de intensidade: 5, 10, 15, 20 e 25
- **Manípulo pequeno** (CH. = M38), permite seleccionar entre 4 níveis de intensidade: 1, 2, 3, 4.

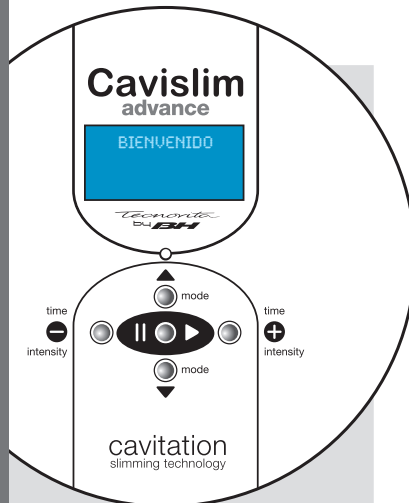

Início da sessão

Uma vez que a máquina seja ligada à corrente eléctrica e o interruptor colocado na posição de funcionamento (I), no monitor será apresentada a seguinte mensagem: **BEM-VINDO**.

Esta mensagem dura 3 segundos, e, após decorridos os mesmos, serão exibidos os seguintes parâmetros de trabalho (por defeito):

TIME = 10:00
CH. = M80
MODE = P1
INT. = 5

A partir deste ecrã poderá modificar os parâmetros tempo, manípulo e modo de trabalho, procurando da seguinte forma o tipo de sessão desejada:

Seleccione o parâmetro a modificar com a seta localizada inicialmente junto à função TIME e que pode alterar com as teclas **+** e **-**.


Variação do período de tempo da sessão


Uma vez seleccionada a função TIME modifique a duração da sessão com as teclas **+** e **-**.

O valor apresentado por defeito é 10 minutos; no entanto, pode ser modificado em intervalos de 1 minuto entre os valores 1:00 e 15:00. Modifique o parâmetro tempo a qualquer momento durante a sessão.

Seleção de manípulo

Uma vez seleccionada a função CH pode-se mudar o manípulo a utilizar na sessão com as teclas **+** e **-**. Se optar pelo manípulo M38, pode escolher se quer que se acendam as luzes vermelhas da sua cabeça ou não, seleccionando com a seta a função **P**. Com as teclas **+** e **-** determine se as luzes devem acender-se, letra **Y**, ou se devem permanecer apagadas, letra **N**. o manípulo **M38**)

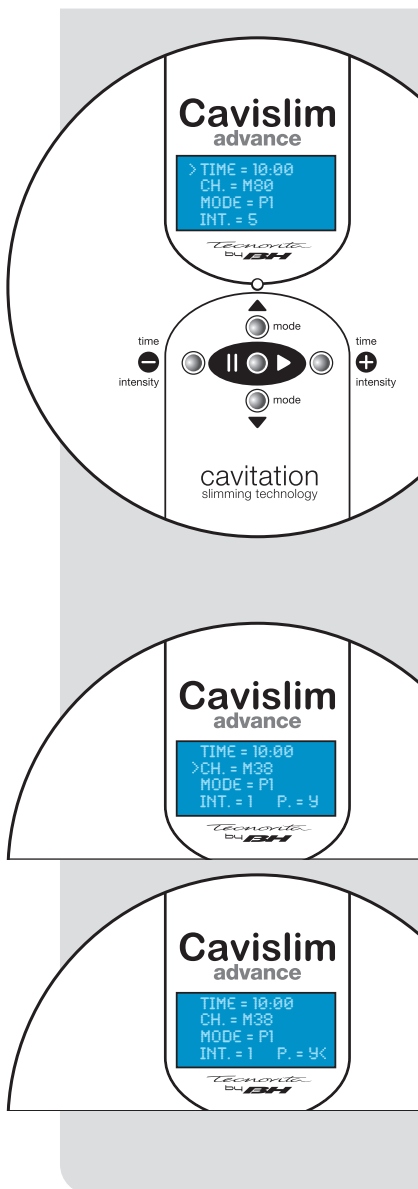


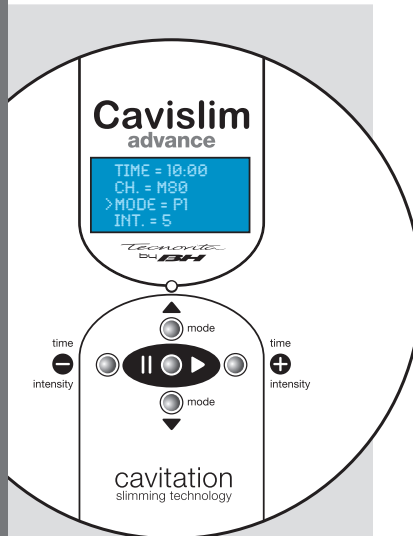

Variação do modo de trabalho

Uma vez seleccionada a função MODE modifique o modo de trabalho com as teclas **+** e **-**.

O valor apresentado por defeito é P1 (frequência de emissão de impulsos muito baixa) que no entanto pode ser modificado seleccionando entre os valores **P1, P2, P3, P4** y **P5** (com o el manípulo **M80**) y **P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9** y **P10** (com o manípulo **M38**)

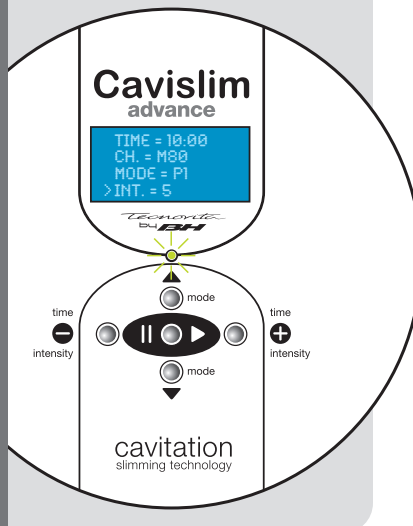

Variação da intensidade da massagem

Uma vez seleccionada a função INT modifique a intensidade da massagem com as teclas **+** e **-**.

O nível de intensidade apresentado por defeito é 5; no entanto, poderá ser modificado seleccionando entre os níveis 5, 10, 15, 20 e 25 (com o manípulo **M80**) ou seleccionando entre os níveis 1, 2, 3 e 4 (com o manípulo **M38**).

Finalmente, deve premir o botão ► e, logo que aparelho inicie o funcionamento (acende-se uma luz verde na parte central da unidade), agarre firmemente o manípulo, coloque-o na zona que deseja trabalhar e pressione o pedal de accionamento para dar início à sua sessão de cavitação..


Ao pressionar o pedal de accionamento, poderá ver que o período de tempo vai diminuindo no ecrã e começa a emissão de impulsos através do manípulo seleccionado. Coloque o manípulo na zona que deseja trabalhar e efectue a massagem da forma indicada no DVD ou no capítulo “modos de aplicação”.
Se desejar pausar a sessão, basta deixar de pressionar o pedal e a emissão de impulsos parará imediatamente.

Quando o contador de tempo chegar a **0:00**, o aparelho parará e emitirá um aviso sonoro que o avisa que a sessão seleccionada terminou. Poderá ver no monitor a seguinte mensagem:

**TEMPO ESGOTADO
PREMIR UMA TECLA
PARA COMEÇAR**

Ao premir qualquer tecla da máquina, o ecrã voltará à sua configuração por defeito:

TIME = 10:00
CH. = M80
MODE = P1
INT. = 5

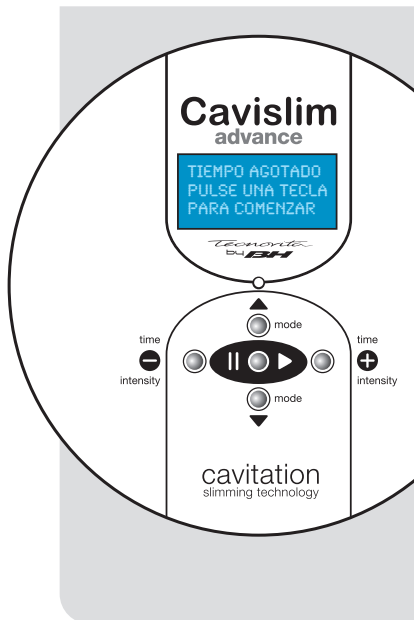

capítulo 3

modos de aplicação


Aplique sempre o gel de forma abundante na zona que deseja trabalhar e comece o tratamento nessa zona deslizando lentamente o manipulador seleccionado e sem apertar, tal como mostram os desenhos. Se necessitar adquirir gel ou algum dos nossos cremes de preparação poderá fazê-lo no estabelecimento onde adquiriu a CAVISLIM ADVANCE ou através da nossa página Web: www.tecnovita.eu

Em cada um dos seguintes capítulos encontrará um quadro com os protocolos de utilização. Antes de começar a utilizar o aparelho, deverá determinar o nível de gordura em que se encontra cada uma das zonas onde vai efectuar o tratamento.

- A** Grande acumulação de gordura de alta densidade.
- B** Grande acumulação de gordura de média densidade
- C** Acumulação média de gordura de média densidade
- D** Pequena acumulação de gordura
- E** Pele de laranja
- F** Sessão de manutenção

abdómen (zona central)

Aplique sempre o gel de forma abundante sobre o seu abdómen e comece o tratamento deslizando lentamente o manipulador e sem apertar, tal como os desenhos mostram.

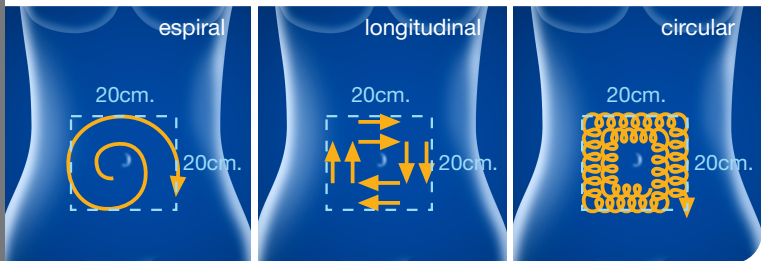


De forma a conseguir obter um melhor resultado, recomendamos a aplicação da CAVISLIM ADVANCE combinando as diferentes técnicas de massagem (espiral, longitudinal e circular) em diferentes sessões. Recomendamos uma posição recostada para uma conseguir uma aplicação mais confortável da CAVISLIM ADVANCE.

Nível	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	15	9	3	10'
B	3	15	9	3	10'
C	3	10	8	2	7'
D	2	10	8	1	7'
E	2	10	7	1	7'
F	2	10	6	1	7'

Recorde que nunca deve aplicar a sobre o umbigo, seios, zona torácica e zona genital.

flancos

PT

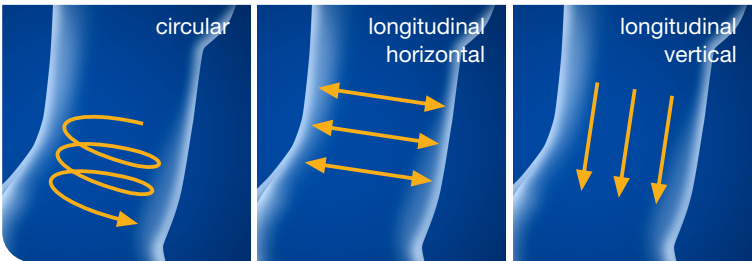


Aplique gel sobre a pele da zona a trabalhar com a CAVISLIM ADVANCE.

Tanto a massagem circular como a massagem longitudinal deverá ser aplicada de cima para baixo, tal como mostram os desenhos. É muito importante respeitar as direcções da massagem porque, desta forma, favorecemos a drenagem. Combine as diferentes técnicas de massagem em diferentes sessões.

Nível	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	4	20	7	3	10'
B	3	15	7	3	10'
C	2	10	6	2	7'
D	1	5	4	1	7'
E	1	5	4	1	5'
F	1	5	4	1	5'

ancas

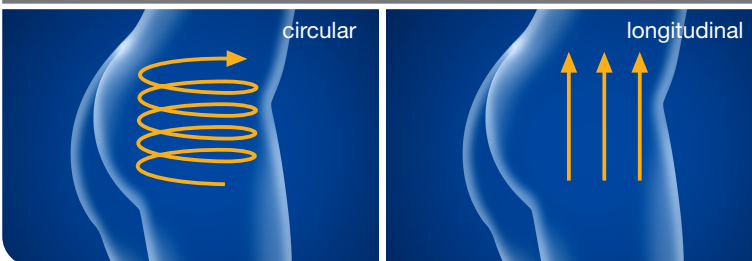


Aplique gel sobre a pele da zona a trabalhar com a CAVISLIM ADVANCE

Tanto a massagem circular como a massagem longitudinal deverá ser aplicada de baixo para cima, tal como mostram os desenhos. Durante o tratamento incida sobre a zona de maior acumulação de gordura.

Nível	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	15	9	3	7'
B	2	15	8	3	7'
C	2	10	8	2	7'
D	1	5	6	2	5'
E	1	5	4	1	5'
F	1	5	4	1	5'

glúteos

Aplice gel sobre a pele da zona a trabalhar com a CAVISLIM ADVANCE

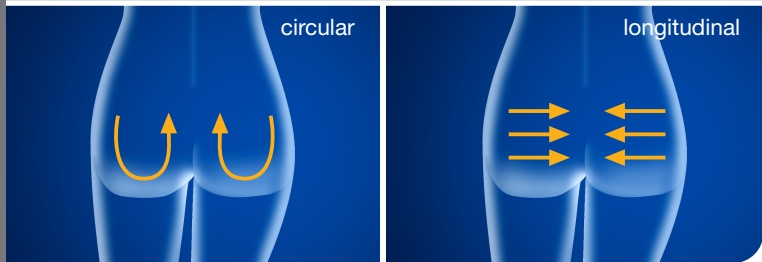


Tanto a massagem longitudinal como a massagem circular deverá ser executada seguindo o sentido das setas de orientação, tal como mostram os desenhos.

Nível	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	5	25	9	4	10'
B	5	20	8	3	7'
C	4	20	7	3	7'
D	3	15	6	2	7'
E	2	15	6	2	10'
F	2	15	5	2	10'

interior da coxa

Recorde-se de nunca aplicar a CAVISLIM ADVANCE dos joelhos até aos pés, porque nessa zona não se produzem acumulações significativas de gordura.

Aplice gel sobre a pele da zona a trabalhar com a CAVISLIM ADVANCE.

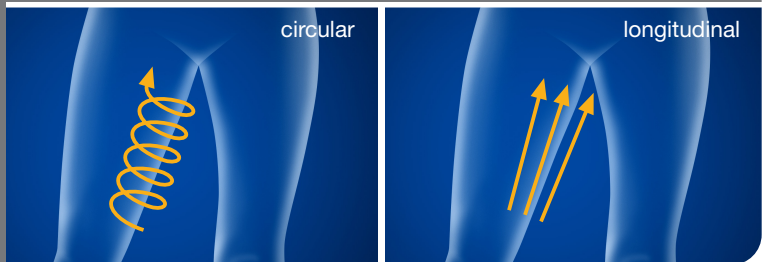

Tanto a massagem longitudinal como a massagem circular deverá ser efectuada de baixo para cima, tal como mostram os desenhos. Seguir estas simples instruções ajudará a obter melhores resultados.

Nível	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	15	8	2	10'
B	3	15	8	2	10'
C	2	10	6	2	7'
D	2	10	6	2	7'
E	2	10	4	2	7'
F	2	5	3	1	7'

interior do joelho




Nesta zona aplicaremos uma ligeira massagem circular, tal como se mostra apresenta nos desenhos.

Nível	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	3	5	7	2	10'
B	3	5	7	2	10'
C	2	5	6	1	7'
D	2	5	4	1	7'
E	1	5	1	1	7'
F	1	5	1	1	7'

Recorde-se de nunca aplicar a CAVISLIM ADVANCE sobre as articulações dos joelhos.

Aplique gel sobre a pele da zona a trabalhar com a CAVISLIM ADVANCE.

braços

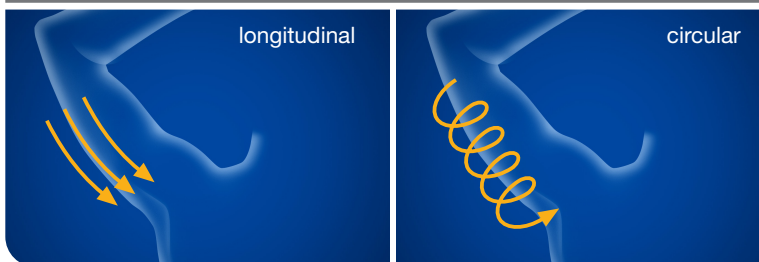

Assegure-se de aplicar gel de forma abundante na zona que vai massajar, o que melhorará a eficácia do tratamento e evitará danos na máquina. Efectue a massagem deslizando o manipulador lentamente e sem apertar. A massagem desta zona deverá ser sempre aplicada no sentido do corpo, conforme mostra o desenho.

Nível	M80		M38		Time
	Mode	Intensity	Mode	Intensity	
A	2	5	6	1	7'
B	2	5	4	1	5'
C	1	5	2	1	5'
D	1	5	2	1	3'
E	1	5	1	1	3'
F	1	5	1	1	5'

Recorde-se de nunca aplicar a CAVISLIM ADVANCE nas zonas das mãos, antebraço ou nas articulações.

capítulo 4

para uma correcta e segura aplicação da Cavislim Advance

Para uma correcta e segura aplicação da CAVISLIM ADVANCE, deverá ter em conta os seguintes períodos de tempo de aplicação:

- **Por zona de trabalho: máximo 15 minutos.**

Entendemos por “zona de trabalho” cada uma das partes do nosso corpo onde podemos aplicar a CAVISLIM ADVANCE. As diferentes zonas de trabalho são: braços, abdómen, flancos, ancas, interior das coxas e interior dos joelhos.

Por exemplo: Na mesma sessão, poderá efectuar a aplicação da CAVISLIM ADVANCE durante 15 minutos nos flancos e 15 minutos nos braços. No entanto, NUNCA deverá efectuar num mesmo dia uma sessão de 30 minutos de aplicação, por exemplo, apenas nos flancos.

- **Por sessão: Máximo 30 minutos.**

Entendemos por sessão a aplicação da CAVISLIM ADVANCE num mesmo dia em 2 zonas de trabalho diferentes (com um máximo de 15 minutos por cada zona).

- **Intervalo entre sessões: Mínimo de 72 horas.**

Entendemos por “intervalo entre sessões” o período de tempo que deve decorrer entre uma sessão e a seguinte. Por exemplo: Numa semana, uma planificação de sessões (no máximo) seria: segunda-feira, quinta-feira e domingo.

- **Cada 20 sessões:**

Deverá efectuar um período de descanso de 3 semanas. Após esse período, poderá repetir completamente o primeiro tratamento ou então, começar o programa de manutenção.

- **Sessões de manutenção:**

Dependem de cada indivíduo, mas uma sessão por mês é considerado suficiente.

MUITO IMPORTANTE

- **Nunca ultrapasse os períodos de tempo de aplicação indicados (15 minutos por zona e 30 minutos no total, por dia).**

O seu corpo não sabe “de onde” está a eliminar a gordura, pelo que não pode efectuar na mesma sessão aplicações de 15 minutos nos flancos, 15 minutos nas pernas, 15 minutos nos braços, etc. RECORDE-SE: No total, o período de tempo máximo num dia, somando todas as partes do corpo a tratar, deverá ser de 30 minutos.

- **E, sobretudo, respeite o período de tempo de descanso de 72 horas entre sessões.** Este período de 72 horas é o tempo que o seu corpo necessita para eliminar toda a gordura que foi dissolvida durante a sessão através do sistema linfático.

preguntas frecuentes sobre o Cavislim

O que é a cavitação?

A cavitação é uma técnica não invasiva (sem cirurgia) que permite moldar o corpo, reduzindo o volume eliminando a celulite e os depósitos de gordura localizados no abdómen, nas ancas, nos flancos, nos braços, nas faces internas das coxas e nos joelhos.

que vantagens tem sobre outros métodos?

A vantagem fundamental é que podemos escolher as zonas determinadas do corpo em que queremos trabalhar. Podemos dizer que se trata de uma tecnologia que nos permite trabalhar a celulite de forma selectiva.

A cavitação é dolorosa?

A utilização da CAVISLIM ADVANCE nunca deverá provocar dor.

É normal escutar um pequeno zumbido nos ouvidos durante a utilização da CAVISLIM ADVANCE?

Sim, é possível que alguns utilizadores escutem um pequeno zumbido durante a aplicação da .

Pode ser utilizada em todas as partes do corpo?

Não pode ser aplicada em todas as partes do corpo. Em nenhum caso deve ser aplicada: sobre a cabeça ou a cara, pescoço, seios, zona torácica, umbigo, antebraço, articulações, genitais, costas, joelhos ou gânglios.

Com a CAVISLIM ADVANCE perde-se peso ou volume?

A CAVISLIM ADVANCE elimina as acumulações de matéria gorda que têm peso e simultaneamente, como fruto da sua eliminação, o nosso corpo perde volume.

A CAVISLIM ADVANCE é eficaz para tratar a pele de laranja?

Sim, a CAVISLIM ADVANCE é eficaz para tratar a pele de laranja, porque destró as células adiposas causadoras do armazenamento de gordura.

A CAVISLIM ADVANCE serve para eliminar as rugas?

A CAVISLIM ADVANCE não é um sistema concebido para a eliminação de rugas.

A CAVISLIM ADVANCE pode ser utilizada na cara?

NUNCA se deve utilizar a CAVISLIM ADVANCE na cara, nos olhos e no pescoço.

Com quantas sessões começam a ser visíveis os resultados?

Podem ser observados resultados a partir das primeiras cinco sessões, no entanto, estes podem variar de pessoa para pessoa.

De quanto tempo é o intervalo entre sessões?

Recomenda-se aguardar 72 horas de intervalo entre sessões.

Após utilizar a CAVISLIM ADVANCE a celulite volta a aparecer?

Embora a CAVISLIM ADVANCE assegure eficácia e durabilidade ao longo

equilibrada, beber muita água, a prática regular de exercício físico e efectuar sessões de manutenção com a CAVISLIM ADVANCE.

Tem efeitos secundários?

Tratando-se de uma pessoa saudável, a CAVISLIM ADVANCE não tem qualquer efeito secundário descrito, no entanto, em algumas pessoas, pode ocorrer um avermelhamento da pele que poderá durar até cerca de 2 horas.

É necessário combinar a CAVISLIM ADVANCE com algum tipo de dieta?

Não é necessário seguir nenhum tipo de dieta em especial, no entanto, é altamente recomendável seguir uma alimentação equilibrada e hidratar-se convenientemente.

Que quantidade de água se deve beber?

É imprescindível começar a hidratação duas horas antes de aplicar a CAVISLIM ADVANCE. Também depois de finalizar a aplicação é aconselhável continuar com a hidratação. Recomenda-se ingerir um mínimo de 2 litros durante estes períodos, porque ajuda na eliminação das toxinas.

É necessário combinar a com alguma prática desportiva?

Não é estritamente necessário, mas a prática de pelo menos 30 minutos de qualquer actividade física potencia os resultados, porque ajuda na drenagem de lípidos.

Que práticas desportivas complementam a aplicação da ?

A plataforma vibratória é o complemento ideal devido às suas qualidades tonificantes e drenantes. Se não tem acesso a uma plataforma vibratória, um passeio, a bicicleta estática, natação ou outro exercício aeróbio realizado durante um mínimo de 30 minutos são de grande ajuda.

Como posso potenciar os efeitos da CAVISLIM ADVANCE?

Conjugando uma dieta equilibrada com a prática habitual de desporto e a ingestão de água em abundância. Para além disso, as massagens de drenagem são de grande ajuda.

Qual a função do gel anticelulítico e do gel reafirmante? Quando os devo utilizar?

1. Gel Anticelulítico: Contém princípios activos que ajudam a eliminar a celulite.
2. Gel Reafirmante: Contém princípios activos que reafirmam a zona tratada.

A sequência de aplicação é a seguinte: durante os primeiros dias de tratamento utiliza-se o gel anticelulítico e, quando se começam a notar resultados, utiliza-se o gel reafirmante. São aplicados antes do gel de cavitação, como qualquer outro sérum. A zona de aplicação deve ser massajada até que absorva bem o gel, em seguida e para iniciar a sessão, aplica-se o gel de cavitação em abundância.

Pode-se utilizar a CAVISLIM ADVANCE sem aplicar gel?

NUNCA, porque o gel com o seu corpo actua como agente condutor dos ultra-sons. Não o utilizando gel, a aplicação da CAVISLIM ADVANCE perde a sua eficácia e o aparelho pode ficar seriamente danificado.

Pode-se utilizar qualquer tipo de gel?

Recomendamos utilizar apenas o gel TECNOVITA by BH, porque a utilização de qualquer outro poderia danificar o aparelho.

Em que situações a utilização da CAVISLIM ADVANCE está contraindicada?

- Estando grávida ou suspeitando que possa estar.
- Estando em período de aleitamento.
- Tratamentos de fertilidade.
- Se apresenta cardiopatias de qualquer tipo.
- Se tem problemas dermatológicos.
- Osteoporose.
- Fibromialgia.
- Tumores malignos.
- Hipertensão.
- Níveis altos de colesterol.
- Insuficiências renais.
- Insuficiências físicas.
- Implantes metálicos ou próteses.
- Malformações físicas.
- Epilepsia.
- Tratamento prolongado com medicamentos: anti-inflamatórios, anticoagulantes, antibióticos ou anti-histamínicos.
- Depressão.
- Tratamento psiquiátrico ou psicológico.
- Problemas hepáticos (fígado gordo), etc.
- Cólon irritável.

Posso utilizar a se estiver grávida?

NUNCA deverá utilizar a CAVISLIM ADVANCE se estiver grávida ou suspeitar que possa estar.

A CAVISLIM ADVANCE pode ser utilizada durante o período de aleitamento?

NUNCA deverá utilizar a CAVISLIM ADVANCE durante o período de aleitamento.

Posso aplicar a CAVISLIM ADVANCE nos seios?

NUNCA se deve aplicar a CAVISLIM ADVANCE sobre os seios.

A CAVISLIM ADVANCE pode ser utilizada durante o período de menstruação?

Não é recomendável a sua aplicação durante esse período sobre a zona abdominal, porque poderá produzir um aumento do fluxo de sangue. No entanto, pode ser aplicada noutras zonas do corpo.

Posso utilizar a CAVISLIM ADVANCE usando o DIU (Dispositivo Intra-Uterino)?

Sim.

A CAVISLIM ADVANCE pode afectar os meus níveis de colesterol?

A utilização da CAVISLIM ADVANCE poderá aumentar os seus índices de colesterol.

Posso utilizar a CAVISLIM ADVANCE se tiver infecções na pele?

A CAVISLIM ADVANCE não deve ser utilizada se tiver infecções na pele. Deverá consultar o seu médico.

Posso utilizar a CAVISLIM ADVANCE se tiver próteses implantadas no ouvido?

A CAVISLIM ADVANCE não deve ser utilizada no caso de ter implante de ouvido.

Posso utilizar a CAVISLIM ADVANCE enquanto estiver a tomar banho ou duche?

Em nenhuma circunstância quer o manípulo quer o aparelho devem entrar em contacto com a água, porque existe o sério risco de electrocussão.

Como devo proceder à limpeza da CAVISLIM ADVANCE e dos manípulos?

Para limpar a CAVISLIM ADVANCE ou os manípulos, nunca os submerja em água. Utilize sempre um pano ligeiramente humedecido com água.

capítulo 6

informação importante de segurança

Este produto está equipado com um cabo que tem um fio condutor de terra e uma ficha com ligação à terra.

Se não funcionar correctamente ou se estiver avariada, a ligação à terra proporciona um percurso de menor resistência para a corrente eléctrica e reduz o risco de descargas eléctricas.

Perigo! Uma ligação incorrecta do condutor do equipamento à terra pode ter como consequência o risco de descargas eléctricas.

Não modifique a ficha incluída no aparelho, se esta não encaixar na tomada eléctrica, solicite a um electricista a instalação de uma tomada adequada. Este produto deve ser utilizado num circuito de 220-240V e dispõe de uma ficha de terra similar à apresentada na Fig. 6.1

Siga estas recomendações:

1. Não use acessórios que não sejam recomendados pelo fabricante.
2. Não utilize o aparelho caso o cabo de alimentação eléctrica estiver danificado.
3. Mantenha o cabo de alimentação eléctrica afastado de superfícies quentes.
4. Nunca utilize o aparelho ao ar livre.
5. Para desligar o aparelho, coloque o interruptor na posição «0» e depois, desligue o cabo da rede eléctrica.



Protecção

Este modelo está dotado de uma protecção electrónica de paragem automática para uma conservação óptima dos circuitos, tanto electrónicos como eléctricos.

Esta protecção será activada (fusível) se a unidade for submetida a um esforço ou sobreaquecimento anormal.

Se eventualmente ocorrer, deverá:

1. Desligar o aparelho da rede de alimentação eléctrica.
2. Coloque o interruptor (L) situado na carcaça do aparelho na posição «0» (OFF) Fig. 6.2
3. Substitua o fusível (C) (1 Amp).
4. Ligue o aparelho a uma tomada de corrente adequada e provida de ligação à terra. Coloque o interruptor (L) na posição [1] Fig. 6.2

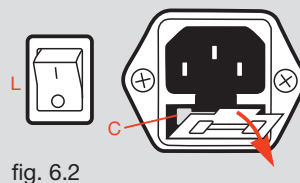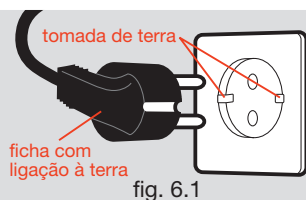

Sugerimos que leia atentamente este exemplar para conhecer com exactidão a cobertura da garantia concedida pelo fabricante e as suas responsabilidades como proprietário.

GARANTIAS

INFORMAÇÃO GERAL

A EXERCYCLE, S.L. deseja agradecer a compra deste produto e a confiança depositada na nossa empresa. Os nossos produtos foram submetidos a um rigoroso controlo de qualidade. No entanto, se ocorrer algum problema com este aparelho durante o período de garantia, solicitamos que leia atentamente as condições de garantia e contacte com o distribuidor autorizado da sua zona.

O presente certificado de garantia foi redigido em conformidade com o disposto na Directiva 1999/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho de 25 de Maio de 1999, sobre determinados aspectos da venda e garantia dos bens de consumo, incorporada na legislação espanhola em virtude da Lei 23/2003, de 10 de Julho, de garantias na venda de bens de consumo. Neste sentido, a EXERCYCLE, S.L., com o NIF B-01029032 e sediada em Vitoria, calle Zurrupitieta, 22, garante este produto nos seguintes termos e condições:

1. PERÍODO DE GARANTIA

O produto a que se refere este certificado está protegido durante um período de DOIS (2) ANOS contados a partir da data de entrega do produto, entendendo-se por tal a data que figura na factura justificada da compra do produto ou da guia de entrega correspondente, se for essa a data posterior. Para eventuais reparações é imprescindível a apresentação da mesma. A política relativamente ao período de garantia pode variar entre países. O período de garantia indicado apenas é aplicável na Europa.

2. DIREITOS COBERTOS PELA GARANTIA

- Reparação ou substituição do produto que, se for o caso, será efectuada num prazo razoável e sem maiores inconvenientes para o consumidor, tendo em conta o tipo de produto e a finalidade que este tiver para o consumidor.
- Exceptuam-se as situações em que a reparação ou substituição impliquem para o vendedor custos que não sejam razoáveis quando comparados com outras formas de solucionar o problema e estas, não prejudiquem o consumidor.
- As reparações serão gratuitas para o consumidor no que se refere a mão-de-obra, deslocações e materiais.
- Em caso de uma eventual reparação ou da substituição de um aparelho por outro novo, o prazo de garantia é temporariamente suspenso até à entrega do novo aparelho, que disporá sempre, como mínimo, de 6 meses de garantia, em caso algum recomeçará um novo período de garantia de 2 anos.
- Da mesma forma, proceder-se-á a um (i) redução do preço ou à resolução do contrato (ii), conforme a escolha do cliente, quando a eventual reparação ou substituição não tenha sido efectuada num prazo razoável ou sem maiores inconvenientes para o consumidor. A redução do preço (i) será proporcional à diferença existente entre o valor que o bem tinha no momento da entrega em conformidade com o estipulado no contrato e o valor que o bem

efectivamente entregue tinha no momento da referida entrega. A resolução do contrato (ii) não procederá nos eventuais casos em que a falta de conformidade seja de escassa importância.

3. A GARANTIA NÃO COBRE:

- Defeitos ou avarias atribuíveis a utilização diferente do estabelecido no Manual de Utilizador.
- A utilização a título profissional ou o arrendamento a título comercial do produto.
- Instalação e/ou montagem deficiente e/ou inadequada, rotura de peças derivada dessa instalação/montagem, (verificar o Manual de Utilizador, onde estão detalhadas as recomendações para a instalação e utilização adequada do aparelho).
- Uso indevido do produto (utilização sem aplicação de gel, exceder tempos de utilização, exposição a níveis de humidade demasiado elevados, etc.) ou problemas derivados de falta de manutenção, como por exemplo: acumulação de sujidade em qualquer parte do aparelho ou dos seus acessórios, etc. (verificar o Manual de Utilizador, onde estão detalhadas as recomendações para a instalação e utilização adequada do aparelho).
- Reparações efectuadas por pessoal não autorizado pela EXERCYCLE, S.L. ou aparelhos abertos ou manipulados por pessoas não autorizadas pelo fabricante.
- Desvios do produto standard, como ligeiras vibrações, ruídos ou roturas de peças que não afectem o normal funcionamento do aparelho e que não sejam atribuíveis a um defeito de fabrico.
- Riscos, arranhões, golpes, quedas, etc., provocadas por utilização descuidada.
- Avarias ou defeitos de funcionamento causados por danos ocorridos durante o transporte do mesmo.

4. VIA DE RECLAMAÇÃO

- A acção para reclamar por falta de conformidade prescreve após três anos a contar da data da entrega do bem.
- O consumidor deverá informar a existência do defeito num prazo de 2 meses a contar do momento em que teve conhecimento da sua existência.
- Esta Garantia não afecta outros direitos legais do consumidor, conforme a legislação vigente, embora seja incompatível com o exercício de outras acções derivadas do saneamento por defeitos ocultos no momento da aquisição.
- Para todas as questões emergentes motivadas pela interpretação ou execução da presente garantia, será aplicável o estabelecido na legislação nacional em vigor e que seja de aplicação.

Qualquer discrepância que possa surgir da interpretação, validade e execução deste contrato, submeter-se-á ao Foro e aos Tribunais da cidade de Vitoria (Espanha).

certificados

Pela presente, Exercycle S.L., declara que este produto cumpre os requisitos essenciais e quaisquer outras disposições aplicáveis ou exigíveis pelas Directivas 2004/108/CE e 2006/95/CE.

componentes

PT

1 Pedal de accionamento




2 Manípulo M80



17 Manípulo M38




3 Suporte de manípulos

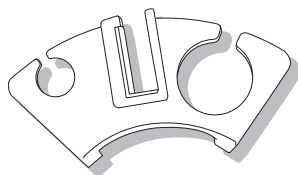

G01 Corpo central



16 Cabo de ligação à rede

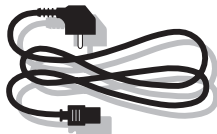

Para pedir uma peça sobresselente, indicar: Código/Quantidade

Nº	Código
1	YS50001
2	YS50002
3	YS70003
16	YS50016
17	YS70017
G01	YS70G01

Ejemplo:

YS50001	1
---------	---

especificações técnicas

Peso líquido: 7 kg

Medidas: 34 cm C. x 38 cm L. x 13 cm A.

Frequência Ultra-sons: 40 KHz

Potência de saída: máximo 25 W (conforme programa)

Fonte de alimentação: Voltagem: AC 220V / Frequência 50 hz

Cavislim
advance

moldeado seguro y eficaz de la figura
moldagem segura e eficaz da figura

Fecha de compra
Data de compra

Comprado en
Comprado em

Comprador
Comprador

Sello del distribuidor
Carimbo do distribuidor

tecnovita
by **BH**

Por favor conserve la factura como comprobante de compra
Por favor guarde a factura como comprovativo de compra

EXERCYCLE,S.L.

c/ Zurrupitieta, 22 • 01015 VITORIA (Spain) • Tel. 945 29 02 58
Fax: +34 945 29 00 49 • e-mail: info@bhfitness.es
SERVICIO POST-VENTA ESPAÑA
Tel.: +34 945 292 012 / 902 170 258 • Fax: +34 945 56 05 27
e-mail: sat@bhfitness.es

MAQUINASPORT, S.A.

Z.I. Assequins s/n • Giesteira Terreirinho • 3750-325 ÁGUEDA (Portugal)
Tel.: +351 234 729 510 • Fax: +351 234 729 519 • e-mail: info@bhfitness.pt
SERVIÇO PÓS-VENDA PORTUGAL
Tel.: +351 707 22 55 24 • Fax: +351 234 729 519

www.tecnovita.eu